


Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad y alas

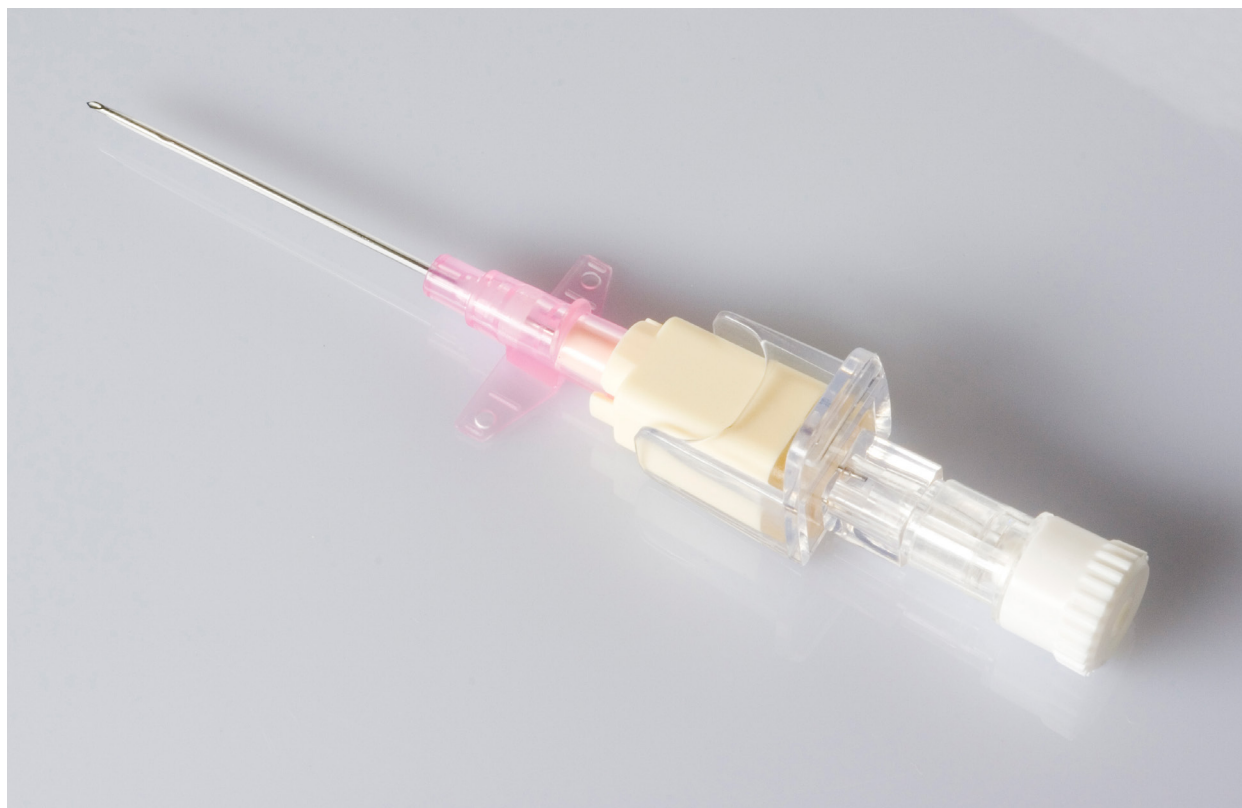

Catéter venoso con dispositivo de seguridad de activación pasiva, disminuye al mínimo la incidencia de accidentes cortopunzantes, no requiere modificar la técnica de inserción.

Disponible en teflón o poliuretano, su diseño con alas facilita la fijación.

Equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja.

Ventajas del Poliuretano (PUR):

- Inserción suave y fácil
- Gran adaptación a la anatomía del vaso sanguíneo
- Reduce el riesgo de flebitis
- No se acoda
- Termosensible, se vuelve aún más suave a temperatura corporal

Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad y alas

Características generales

Aguja con triple afilado y bisel de corte orientado hacia atrás para evitar el dolor al paciente, facilita el camino para el catéter

Catéter con punta cónica atraumática

Óptima distancia entre el catéter y el bisel de la aguja

De pared delgada tanto en teflón como poliuretano, contiene 3 líneas radiopacas

Cámara de retorno transparente, permite ver rápidamente el reflujo sanguíneo

Filtro de aire hidrofóbico, microporoso y removible permite sellar evitando el riesgo de contaminación


Equipado con una tapa LUER LOCK, para cerrar la vía venosa después de retirada la aguja

Puerto de inyección directa para administración de medicamento intermitente durante la infusión (opcional)

Bisel triple afilado/corte hacia atrás




Radiopaco

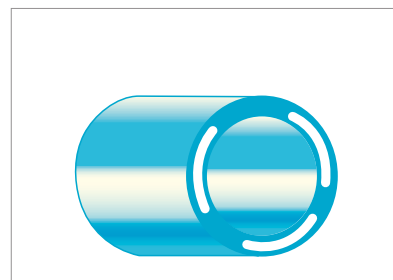


Punta atraumática




Rápido reflujo

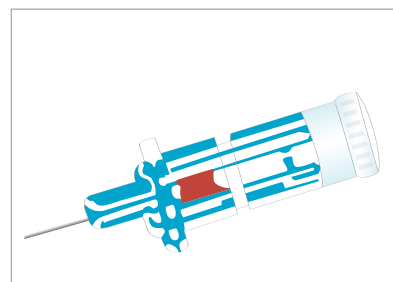

Válvula de seguridad

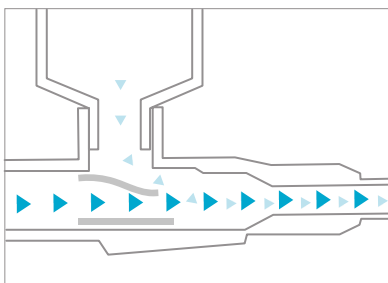

Fácil de instalar

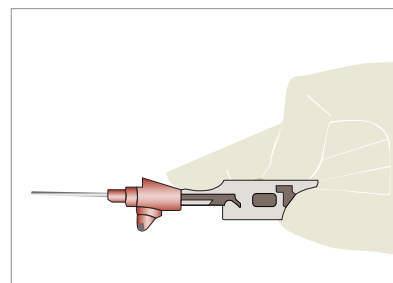


No se acoda




Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad y alas


Modo de empleo

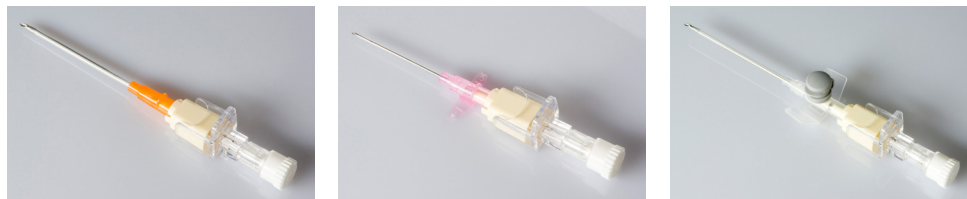

1. Inserte el catéter venoso.

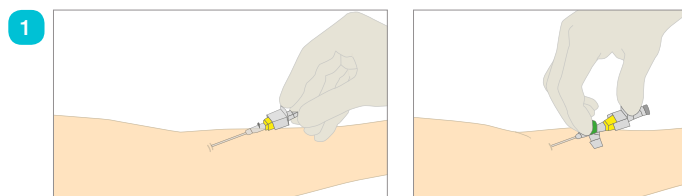

2. Visualice el retorno de sangre confirmando la posición de la punta de la cánula dentro de la vena. Sostenga la aguja firmemente y deslice la cánula.

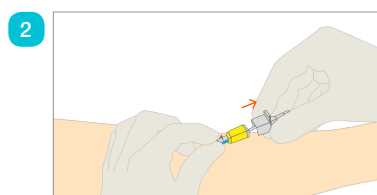


3. Aplique presión sobre la vena en la zona distal de la cánula. (a)


Estabilice la cánula presionando también en la zona proximal. (b)

Retire la aguja. (c)


El dispositivo de seguridad se activará automáticamente.

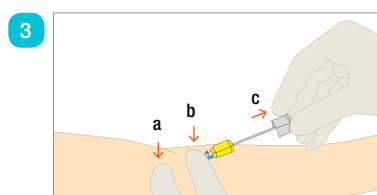

4. Separe completamente el dispositivo de seguridad de la cánula (d), continúe presionando la vena impidiendo el reflujo de sangre (f), continúe estabilizando la cánula presionando con el otro dedo (e), conecte el set de infusión, tapa LUER LOCK o el dispositivo de su preferencia.

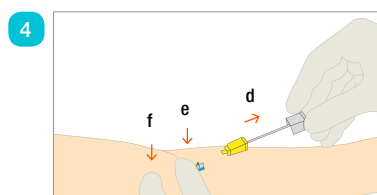

5. Deseche la aguja con el dispositivo de seguridad activado según la normativa de su hospital o clínica.

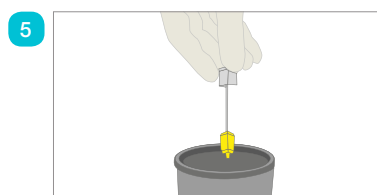

Catéter venoso con dispositivo de bioseguridad y alas

Especificaciones

Código FEP	Código PUR	Gauge	L mm	Ø ext. Cat.	Ø int. Cat.	Flujo	Unidades por caja
			mm	mm	mm	ml/min	
DEL-3716522	DEL-3718122	● 24	19	0,74	0,55	29	50
DEL-3726522	DEL-3728122	● 22	25	0,90	0,65	42	50
DEL-3736522	DEL-3738122	● 20	32	1,00	0,75	59	50
DEL-3786522	DEL-3788122	● 18	32	1,30	0,95	103	50
DEL-3746522	DEL-3748122	● 18	45	1,30	0,95	96	50
DEL-3747522	DEL-3749122	● 18	50	1,30	0,95	94	50
DEL-3756522	DEL-3758122	○ 17	45	1,50	1,15	155	50
DEL-3766522	DEL-3768122	● 16	45	1,75	1,35	225	50
DEL-3767522	DEL-3769122	● 16	50	1,75	1,35	223	50
DEL-3776522	DEL-3778122	● 14	45	2,00	1,55	290	50
DEL-3777522	DEL-3779122	● 14	50	2,00	1,55	288	50

- Producto esterilizado con OE
- Libre de látex
- Certificación: ISO 9001-ISO 13485 / CE

Almacenamiento

- Duración del producto: 4 años, según fecha indicada en envase
- Idealmente mantener a T°<30°C

Empaque

Individual, sistema peel up.

Origen

Italia.